

## ŘEZNÉ KOTOUČE

	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
<i>Řezné kotouče</i>				
<i>Nerezový kotouč na sádku s bílým středem</i>	<b>WP-65</b>	<b>WP-65-2</b>	<b>WP-50</b>	-
<i>Speciální tvrzený kotouč na syntetiku s modrým středem</i>	<b>BS-65</b>	-	<b>BS-50</b>	<b>BS-50-2</b>
<i>Velmi tvrdý titanový kotouč na syntetiku s modrým středem</i>	<b>BS-65-GT</b>	-	<b>BS-50-GT</b>	-

## OSTATNÍ

*Pojistná matice pro zajištění kotouče* OSC 202

*Nastavitelná vodící a hloubková měřka* OSC 203

*Transportní kufr* OSC 204



DISTRIBUTOR :

ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5  
160 00 Praha 6  
tel : 234 123 355  
fax : 234 123 360  
e-mail : info@erilens.cz

 **ERILENS**



Oscilační pila na sádrové a syntetické fixace



# OSCIMED 2000

VELMI NÍZKÁ HLADINA HLUKU  
DÍKY PATENTOVANÉ  
PROTIHLUKOVÉ TECHNOLOGII


## 62 dB

POUZE

## 760 g.



*Lehký a moderní kufr pro  
snadný a bezpečný transport  
pily OSCIMED 2000.*

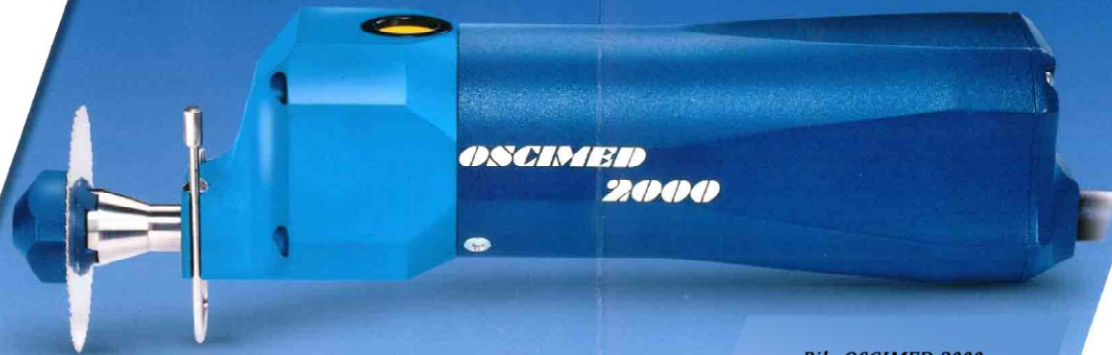


*Pila OSCIMED 2000  
v životní velikosti*



- **Vysoce bezpečný, bezkartáčový motor.**
- **Ergonomický, moderní tvar pro snadné použití jednou rukou.**
- **Rychlá výměna kotouče s patentovanou neklouzavou pojistnou maticí.**
- **Speciální žezné kotouče s plastovým jádrem potlačujícím hluk.**
- **Nastavitelná vodící a hloubková měrka.**

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Váha : 760 g  
Průměr : 46 mm  
Výkon : 100 W  
Délka pily : 210 mm  
Jištění : IP 54  
Délka kabelu zdroje : 1,1 m  
Délka kabelu 24 VDC : 3,5 m  
Oscilační úhel kotouče : 6,2°  
Napájení : 85 - 264 VAC 50 - 60 Hz  
Evropská norma 93/42 CEE třída I : EN 60 601  
Provozní teplota - cyklus : 10°C - 25°C - 3/20 min  
Rychlost motoru / frekvence : 12 000 ot/min / 200 Hz

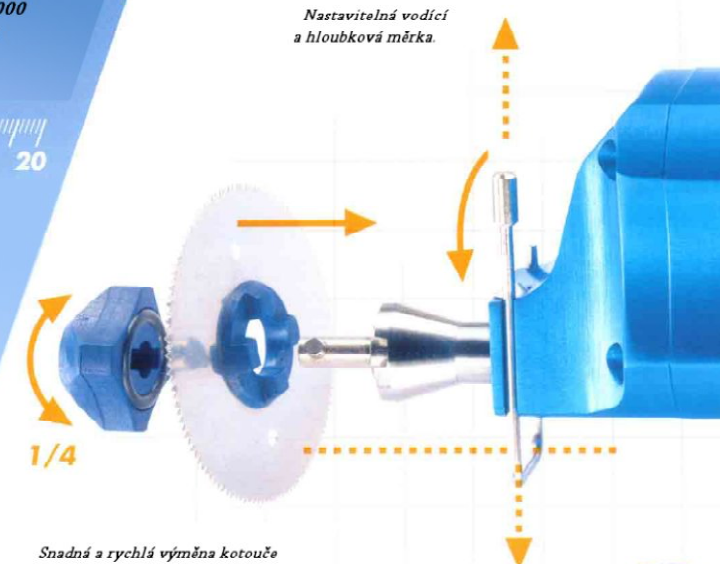

*Snadná a rychlá výměna kotouče  
bez nutnosti použití dalších nástrojů.*

